

REGENhial INTIM Gel

LaviGor
LABORATORIOS

CN 179694.3

Presentación:
2 tubos de 24 ml
2 aplicadores

Presentation:
2 tubes of 24 ml
2 applicators

REGENhial INTIM Gel

Gel hidratante y reparador vaginal

Descripción

Gel hidratante y reparador vaginal de ácido hialurónico puro (*) al 1%, arginina y glicerol.

Indicaciones

Regenhial Intim Gel alivia los síntomas de la sequedad vaginal, atrofia y molestias relacionadas como el picor, el escozor y la dispareunia (dolor durante las relaciones sexuales), producidas durante el embarazo, el puerperio, la menopausia o bien como consecuencia de la irritación física o química, o asociada al uso de anticonceptivos orales u otros medicamentos o tratamientos. Hidrata, repara y mantiene la elasticidad de los tejidos vaginal y perivaginal. Además, mejora la lubricación, por lo que también está indicado para facilitar las relaciones sexuales.

Vaginal moisturising and repairing gel

Description

Vaginal moisturising and repairing gel based on pure hyaluronic acid (*) at 1%, arginine and glycerol.

Indications

Regenhial Intim Gel relieves the symptoms of vaginal dryness, atrophy and the troubles related to itching, stinging and dyspareunia (painful sexual intercourse), caused during pregnancy, puerperium, menopause or as a consequence of physical or chemical irritation, or associated to the use of oral contraceptives or other medicines or treatments. It moisturises, repairs and maintains the elasticity of vaginal and perivaginal tissues. Besides, it improves lubrications, thus it is also indicated to facilitate sexual intercourse.

Ingredientes / Ingredients:

Aqua, glycerin, polysorbate 20, sodium hyaluronate (*), arginine, lactic acid, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin.

(*) Certificado por Ecocert.

(*) Certified by Ecocert.

Instrucciones de uso

Lavar las manos antes y después de su utilización.

Regenhial Intim Gel se aplica en el interior de la vagina con la ayuda del aplicador, previamente llenado con 2 ml.

Se recomienda una aplicación de Regenhial Intim Gel 2 o 3 veces a la semana o puede utilizarse diariamente en caso de necesidad, preferentemente antes de acostarse.


Instructions for use

Wash your hands before and after use.

Regenhial Intim Gel is to be applied inside the vagina with the help of the applicator, previously filled with 2 ml.

It is recommended one application of Regenhial Intim Gel twice or three times a week or can be used daily if needed, preferably before going to bed.

Componentes: 2 tubos y 2 aplicadores (cánula + émbolo).
Components: 2 tubes and 2 applicators (cannula + piston).

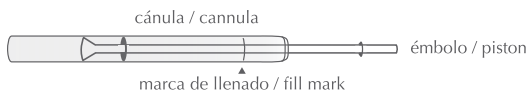

1. Enroskar el tubo en el aplicador.
Screw the tube into the applicator.

2. Apretar el tubo y llenar suavemente el émbolo hasta observar la marca de llenado en el extremo no enroscado de la cánula. La dosis de gel se corresponde con un poco menos de la mitad de la capacidad del dosificador, y se ha de evitar la presencia de aire en el interior.




Press the tube and gently fill the piston until the fill mark on the non-screwed end of the cannula is observed. The gel dose corresponds with a little less of half of dispenser capacity and the presence of air inside must be avoided.

3. Desenroskar el aplicador del tubo e introducirlo profundamente en la vagina, preferentemente tumbada, y vaciar la totalidad de la dosis de **Regenhial Intim Gel** empujando el émbolo con suavidad. Se recomienda aplicar una capa fina de **Regenhial Intim Gel** en la punta del aplicador para facilitar la introducción en la vagina.

Unscrew the applicator from the tube and introduce it deeply in the vagina, preferably in decubitus position, and empty the whole dose of **Regenhial Intim Gel** by pulling the piston gently. It is recommended to apply a thin layer of **Regenhial Intim Gel** on the end top of the applicator in order to facilitate its introduction into the vagina.

4. Después de cada aplicación limpiar el aplicador con agua jabonosa y secar correctamente el aplicador. Se recomienda utilizar un aplicador distinto para cada tubo.

After each application, clean the applicator with soapy water and dry it properly. It is recommended to use a different applicator for each tube.

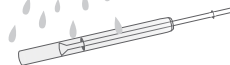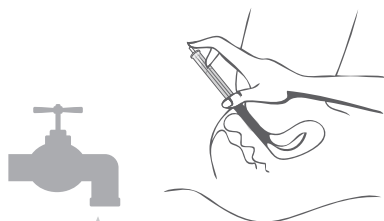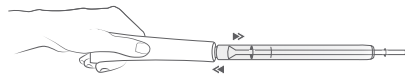

Contraindicaciones

No aplicar en caso de hipersensibilidad confirmada o bajo sospecha a cualquiera de los componentes de **Regenhial Intim Gel** (ver composición).

Precauciones

No usar en caso de alteración en el embalaje. • No utilizar el producto después de la fecha de caducidad indicada en el envase. • No ingerir. • Evitar el contacto con los ojos. • Consérvese a temperatura ambiente, lejos de focos de calor y evitar la luz directa. • Mantener fuera del alcance y de la vista de los niños. • Después de usar, depositar en el contenedor de residuos apropiado, según la práctica nacional aplicable.

Contraindications

Do not apply in case of confirmed or under suspicion hypersensitivity to any of the components of **Regenhial Intim Gel** (see composition).

Warnings

Do not use in case of any alteration in the packaging. • Do not use the product after the expiry date indicated on the packaging. • Do not ingest. • Avoid contact with eyes. • Keep at room temperature, away from heat sources and avoid direct light. • Keep out of reach and sight of children. • After use, place in the appropriate waste container, according to the country applicable practice.